

**Specificațiile produsului:**

- plaja de măsură a greutatei: 0.50 – 20.00 kg/ 1.1-44 lbs
- greutatea minimă care poate fi memorată: 1kg/2.2 lbs
- toleranța / eroarea de măsurare: +/- 0.04kg



# CÂNTAR DIGITAL PENTRU COPII



Importator: **Far East Trading SRL**, str. Arh. D. Hârjeu 59G, București  
Tel: 0744-646664

## Manual instrucțiuni

---


Cod produs R 0924





3) După selectarea și confirmarea unității de măsură pe afișaj va apărea ultima greutate înregistrată și apoi se va schimba automat la valoarea „0”.

\* ultima greutate va fi memorată numai dacă aceasta este mai mare de 1 kg

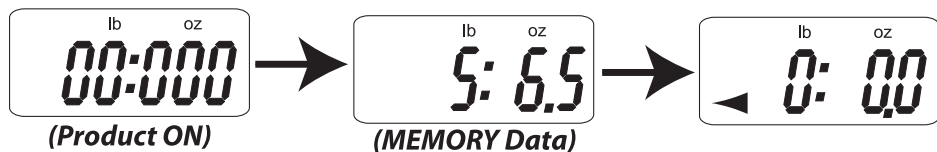

4) Așezați salteaua pe cântar, pentru că și aceasta are greutate, apăsați butonul de pornire pentru a reseta afișajul la „0” (resetarea Tarei cântarului la 0).



#### IMPORTANT:

**Nu este obligatoriu să folosiți salteaua atunci când cântăriți copilul, însă se recomandă folosirea sa deoarece asigură o suprafață mai caldă și moale pentru copil.**


5) Așezați copilul pe cântar pentru a măsura greutatea

- dacă bebelușul se mișcă sau plânge puteți acționa butonul de melodii “MUSIC” pentru a liniști copilul

- apăsați butonul o dată pentru a începe melodia și încă o dată pentru a o opri

NOTĂ: melodia poate fi pornită numai când cântarul este deschis.

6). În timpul cântării pe afișaj va apărea, intermitent, greutatea copilului

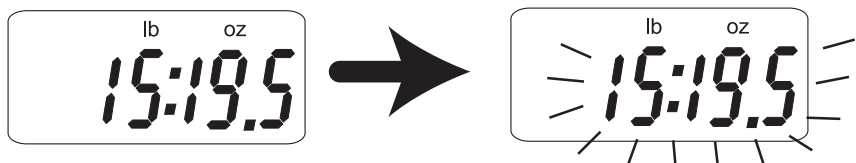

7) Această ultimă valoare va fi memorată automat și va fi afișată la următoarea deschidere a cântarului.

\* valoarea va fi memorată numai dacă greutatea este de minim 1 kg.

8) Cântarul se va închide automat după 30 secunde și poate fi repornit apăsând butonul de pornire.

#### MEMORIA CÂNTARULUI:

- la pornire se va afișa ultima valoare memorată

- valoarea minimă a greutății trebuie să fie de 1 kg pentru a putea fi memorată

#### INDICARE STARE BATERIE:

Când pe afișaj apare simbolul de baterie consumată (fig 4) înlocuiți cele 4 baterii de 1,5V cu unele noi înainte de a porni cântarul.



Figura 4

#### INDICATOR SUPRAÎNCĂRCARE:

Când pe afișaj apare 0-LO înseamnă că greutatea copilului depășește greutatea maximă admisă (max 20kg/44 lbs). În acest caz folosiți un aparat de măsurare a greutății adecvat.



#### PROBLEME FUNCȚIONARE:

Dacă produsul nu funcționează corect verificați următoarele:

Problemă	Cauză	Soluție
Cântarul nu poate fi pornit	- nu are baterii / baterii slabe - polaritate greșită a bateriilor	- introduceți baterii - așezați polaritatea bateriilor după cum este indicată în diagrama din interiorul compartimentului
Fără melodie / volum scăzut melodie	- nu are baterii / baterii slabe - polaritate greșită a bateriilor  - cântarul nu este pornit	- introduceți baterii noi - așezați polaritatea bateriilor după cum este indicată în diagrama din interiorul compartimentului - melodia se aude doar când cântarul este pornit
Afișajul nu funcționează	- nu are baterii / baterii slabe - polaritate greșită a bateriilor	- introduceți baterii - așezați polaritatea bateriilor după cum este indicată în diagrama din interiorul compartimentului

\* Specificațiile, conținutul și imaginile prezentate în acest manual se bazează pe informațiile din momentul tipării acestuia și pot fi modificate fără o avizare prealabilă.